

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO:	CA-01-17	
VERSIÓN:	05	
VIGENCIA:	01 Abr 2026	
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA		Página 1 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

1. OBJETIVO:

Establecer un documento que detalle el procedimiento adecuado para notificar los eventos adversos relacionados con el uso de dispositivos médicos, reportados por los integrantes del Sistema Nacional de Tecnovigilancia, para salvaguardar la salud y la seguridad de la población asegurando una notificación efectiva y oportuna para su pronta atención y seguimiento de los eventos adversos generados con los productos distribuidos por Famproject Cía. Ltda.

2. ALCANCE:

Este procedimiento aplica a todos los productos (dispositivos médicos y reactivos bioquímicos de diagnóstico in vitro para uso humano) que comercializa Famproject Cía.Ltda.

3. DEFINICIONES

Dispositivos Médicos de Uso Humano: son los artículos, instrumentos, aparatos, artefactos o invenciones mecánicas, incluyendo sus componentes, partes o accesorios, fabricados, vendidos o recomendados para uso en diagnóstico, tratamiento curativo o paliativo, prevención de una enfermedad, trastorno o estado físico anormal o sus síntomas, para reemplazar o modificar la anatomía o un proceso fisiológico o controlarla. Se considera dispositivo médico a cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, aplicación, implante, reactivo para uso in vitro, software, material u otro artículo similar o relacionado, destinado por el fabricante a ser utilizado solo o en combinación, para seres humanos, para los siguientes procesos:

- Diagnóstico, prevención, monitorización, tratamiento o alivio de la enfermedad
- Diagnóstico, monitorización, tratamiento, alivio o compensación de una lesión.

FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACION		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
K.Lalaleo	A.Fariño	V.Medina
Nombre: Kevin Lalaleo Cargo: Especialista de Aplicaciones Fecha: 30 Marz 2026	Nombre: Alex Fariño Cargo: Jefe Comercial Fecha: 31 Marz 2026	Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 01 Abr 2026

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-17		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 01 Abr 2026		
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA		Página 2 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

- Investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía o de un proceso fisiológico
- Soporte o mantenimiento de la vida
- Control de la concepción
- Desinfección de dispositivos médicos
- Suministro de información por medio de un examen in vitro de muestras procedentes del cuerpo humano.

Dispositivos médicos de uso humano para diagnóstico in vitro (DMDIV): son los dispositivos médicos de uso humano destinados para su uso en el diagnóstico, seguimiento o compatibilidad de condición fisiológica, estado de salud, enfermedad o malformaciones congénitas. Esto incluye reactivos, reactivos bioquímicos, calibradores, materiales de control, recipientes para muestras, software e instrumentos o aparatos, accesorios u otros artículos relacionados.

Dispositivo médico de uso humano activo (DMA): es el dispositivo médico de uso humano que actúa mediante la conversión de la energía producida por una fuente de energía eléctrica, u otra fuente de poder distinta de la generada directamente por el cuerpo humano o por la gravedad. Se clasifican en: dispositivo médico de uso humano activo terapéutico y dispositivo médico de uso humano activo para diagnóstico.

Dispositivo médico de uso humano activo terapéutico: es el dispositivo médico de uso humano activo utilizado sólo o en combinación con otros dispositivos médicos, destinado a mantener, modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en el contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia.

Dispositivo médico de uso humano activo para diagnóstico: es el dispositivo médico de uso humano activo utilizado sólo o en combinación con otros dispositivos médicos, cuyo objetivo es suministrar información para la detección, diagnóstico, seguimiento o tratamiento de una condición fisiológica, estado de salud, enfermedad o malformaciones congénitas.

Dispositivo médico de uso humano invasivo (DMI): aquel dispositivo médico de uso humano que penetra parcial o completamente en el cuerpo humano, ya sea a través de un orificio corporal o por la superficie corporal, pudiendo ser o no a través de una intervención quirúrgica.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-17		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 01 Abr 2026		
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA		Página 3 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Dispositivo médico de uso humano implante: cualquier dispositivo médico de uso humano invasivo previsto para ser implantado parcial o completamente en el cuerpo humano o para reemplazar una superficie epitelial o la superficie ocular, mediante intervención quirúrgica, y destinado a permanecer en el organismo después de dicho procedimiento de implantación.

Dispositivo médico de uso humano no invasivo (DMNI): aquel dispositivo médico de uso humano que no penetra en el cuerpo humano.

Distribuidoras de dispositivos médicos de uso humano: son establecimientos autorizados para realizar importación, exportación y venta únicamente de dispositivos médicos de uso humano. Requieren para su funcionamiento de la responsabilidad técnica de un profesional calificado.

ECRI: Instituto de Investigación de Atención de Emergencias

Acción correctiva: acción destinada a eliminar la causa de una no conformidad detectada o de cualquier otra situación no deseada.

Acción correctiva de seguridad de campo (FSCA): se trata de una medida adoptada por un fabricante y/o titular del registro sanitario para reducir el riesgo de muerte o de deterioro grave de la salud asociado con el uso de un dispositivo médico. Este tipo de medidas deben notificarse mediante una nota de seguridad en campo (FSN, nota de seguridad en campo)

Acciones preventivas: acción medida para eliminar la causa de una posible no conformidad u otra situación no deseable

Amenaza grave para la salud pública: cualquier tipo de acontecimiento o deficiencia del dispositivo médico que podría tener como resultado un riesgo inminente de muerte, deterioro grave de la salud, lesión grave o enfermedad grave de más de un paciente, usuario u otra persona y que requiera una actuación correctiva rápida.

CNTV: Centro Nacional de Tecnovigilancia

Confidencial: respeto del secreto de la identidad de la persona para la que se ha notificado un evento adverso al CNTV y que se extiende a toda la información de carácter personal

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-17		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 01 Abr 2026		
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA		Página 4 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

o médico. De forma similar, se mantendrá la confidencialidad de la información personal relativa a los profesionales notificadores.

Daño: lesión física o daño a la salud de las personas, o bien daño a la propiedad o al medio ambiente.

De inmediato: A los fines de la notificación de efectos adversos “de inmediato” significa con la mayor brevedad posible, a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario después de la fecha en la que se tomó conocimiento del episodio.

Defectos de calidad: cualquier irregularidad o alteración en las características físicas, químicas y microbiológicas del dispositivo médico que está en contradicción con las especificaciones definidas por el fabricante y que se sirvieron de base para la emisión del registro sanitario, o que impida que el dispositivo médico cumpla de manera segura y efectiva con el uso previsto durante todo su ciclo de vida.

Error de uso: acción del usuario o falta de acción del usuario mientras utiliza el dispositivo médico que conduce a un resultado diferente al previsto por el fabricante o esperado por el usuario.

Evento adverso: cualquier mal funcionamiento o deterioro en las características y/o desempeño de un dispositivo médico comercializado incluido un resultado analítico erróneo, así como cualquier inadecuación en la etiqueta o las instrucciones de uso que, directa o indirectamente, pueden llevar o hayan podido llevar a la muerte de un paciente o usuario, u otras personas o a un grave deterioro en su salud.

Evento adverso reportable: todo evento adverso que cumplan con los siguientes criterios:

- a) Ha ocurrido un evento adverso
- b) El dispositivo médico contribuyó o produjo el evento adverso
- c) El evento adverso condujo a uno de los siguientes resultados: muerte de un paciente, usuario u otra persona y/o potencial para la muerte o deterioro grave en la salud de un paciente, usuario u otra persona.

Fallas de funcionamiento: mal funcionamiento o deterioro en las características y/o desempeño de un dispositivo médico que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro de la salud.

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-17		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 01 Abr 2026		
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA		Página 5 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Informe de investigación inicial: informe que el fabricante o el titular de registro sanitario debe enviar al CNTV, que corresponde a la toma de conocimiento del evento adverso asociado al uso del dispositivo médico, mediante el formato establecido por la ARCSA para el efecto.

Informe de investigación de seguimiento: informe que el fabricante o el titular de registro sanitario debe enviar al CNTV, donde informa el estado de avance de la investigación del evento adverso asociado al uso del dispositivo médico, mediante el formato establecido por la ARCSA para el efecto.

Informe de investigación final: informe que el fabricante o el titular de registro sanitario deben enviar al CNTV, donde informa la investigación completa del evento adverso asociado al uso del dispositivo médico, debe incluir las causas, medidas correctivas, medidas preventivas y conclusiones finales de cierre de la investigación, mediante el formato establecido por la ARCSA para el efecto.

Instrucciones de uso: información proporcionada por el fabricante para informar al usuario sobre la finalidad prevista y el uso adecuado del dispositivo médico, así como las precauciones que deben adoptarse.

Investigación clínica: toda investigación o estudio sistemático realizado en uno o varios seres humanos, que se emprende con el fin de evaluar la seguridad o el desempeño de un dispositivo médico. Es sinónimo de “ensayo clínico” y “estudio clínico”.

Mal funcionamiento o deterioro: una falla de un dispositivo para funcionar de acuerdo con su uso previsto cuando se usa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Número de lote/ serie: designación (mediante números, letras o ambos) del lote serie de dispositivos médicos que, en caso de necesidad, permita y revisar todas las operaciones de fabricación e inspección practicadas durante su producción permitiendo su trazabilidad.

Registro sanitario: es la certificación otorgada por la autoridad sanitaria nacional, para la importación, exportación y comercialización de los productos de uso y consumo humano. Dicha certificación es otorgada cuando se cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, eficacia y aptitud para consumir y usar dichos productos cumpliendo los trámites establecidos en la presente Ley de sus reglamentos.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-17	
VERSIÓN: 05	
VIGENCIA: 01 Abr 2026	
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA	Página 6 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

Reporte inmediato de tecnovigilancia: reportes de tecnovigilancia relacionados a un evento adverso con un dispositivo médico de uso humano en particular.

Reportes periódicos de tecnovigilancia: conjunto de reportes de tecnovigilancia relacionados a la ocurrencia de eventos adversos e información sobre la seguridad de un dispositivo médico o grupos de dispositivos médicos en un periodo definido y en donde se ha realizado un proceso de gestión interna eficiente.

Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de un daño y la gravedad de dicho daño.

Riesgo Sanitario: se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno, adverso, conocido o potencial, que ponga en peligro la salud o la vida humana, derivado de la exposición de la población a factores biológicos, físicos o químicos, por la producción, comercialización, distribución, uso, consumo o posesión entre otros de los productos a los que se refiere esta normativa técnica sanitaria.

Señal: información comunicada sobre una posible relación causal entre un evento adverso y un dispositivo médico cuando previamente se desconocía esta relación o estaba documentada en forma incompleta. Habitualmente se requiere más de una notificación para generar una alerta, dependiendo de la gravedad del acontecimiento y de la calidad de la información. Una vez confirmada y validada la señal se conocerá como alerta.

Señal de alerta: situación generada por un caso o un número de casos reportados con una misma asociación o relación causal entre un evento adverso y un dispositivo médico, siendo desconocida o no documentada previamente y que presuma un riesgo latente en salud.

Sistema nacional de tecnovigilancia (SNTV): se organiza, estructura y funciona como un sistema de control y vigilancia para la identificación, recolección, evaluación, gestión y divulgación de los eventos adversos relacionados a los dispositivos médicos de uso humano durante su uso, la cuantificación de riesgos e implementación de medidas con el objetivo de proteger la salud y la seguridad de los pacientes, usuarios y todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente con la utilización de dichos productos.

Tecnovigilancia: es el conjunto de actividades de vigilancia del mercado que tienen por objeto la identificación, recolección, evaluación, gestión y divulgación de eventos adversos consecuencia del uso de dispositivos médicos de uso humano; así como, la

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-17	
VERSIÓN: 05	
VIGENCIA: 01 Abr 2026	
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA	Página 7 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

identificación de los factores de riesgo asociados a éstos, para prevenir su aparición y minimizar sus riesgos.

UDI: serie de caracteres numéricos o alfanuméricos que se crea mediante una norma de codificación e identificación de dispositivos médicos mundialmente aceptada. Permite la identificación inequívoca de un dispositivo médico específico en el mercado. Se compone del UDI-DI (identificador de dispositivo) y el UDI-PI (identificador de producción).

Uso anormal: acto u omisión de un acto por el operador o usuario de un dispositivo médico como resultado de la conducta que está mas allá de cualquier medio razonable de control de riesgos del fabricante.

Usuario: persona ya sea profesional o no profesional, que utiliza un dispositivo médico. El paciente puede ser el usuario.

4. COMITÉ DE TECNOVIGILANCIA DE FAMPROJECT CÍA.LTDA.

El comité estará conformado por:

- Presidente: Responsable Técnico
- Vicepresidente: Licenciado en Laboratorio Clínico
- Secretario: Licenciado en Laboratorio Clínico
- Vocales: Asesores Comerciales

Donde:

Responsable Técnico, (Químico o Bioquímico Farmacéutico): quien será el responsable de receptar la notificación de tecnovigilancia del Jefe de Servicio Técnico, Jefe Comercial y Asesores Comerciales, e informar al Titular del Registro Sanitario. Cuando corresponda cargar al CNTV mediante correo electrónico (tecno.vigilancia@controlsanitario.gob.ec) o en su defecto a donde indique la ARCSA. En caso de que la ARCSA necesite mayor detalle, prestar la atención que así ellos requieran.

Vicepresidente, (Licenciado en Laboratorio Clínico): brindar el apoyo para la recepción de la notificación de tecnovigilancia de los clientes (Propietarios de laboratorios, Laboratoristas Clínicos, Técnicos, etc.).

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-17	
VERSIÓN:	05	
VIGENCIA:	01 Abr 2026	
TÍTULO:	TECNOVIGILANCIA	Página 8 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Secretario (Licenciado en Laboratorio Clínico): redactar el evento adverso comunicado por parte de los clientes (Laboratorios clínicos y pacientes), realizando su correspondiente análisis y en caso de corresponder descartar o no, un mal uso.

Vocales (Asesor(a) Comercial) (Licenciado en Laboratorio Clínico): brindar el apoyo para la recepción de la notificación de tecnovigilancia de los clientes. Debido a, que el departamento comercial está en contacto directo día a día con los clientes.

Nota: el Vicepresidente, Secretario y Vocales, serán considerados como primer filtro por lo cual, deberán revisar la información del dispositivo médico – reactivo y analizar que no sea un efecto adverso falso (mal uso)

4.1.REUNIONES DEL COMITÉ DE TECNOVIGILANCIA

El comité de tecnovigilancia se reunirá de manera ordinaria una vez cada mes y de forma extraordinaria cuando el caso lo amerite previa convocatoria de su Coordinador técnico.

5. PROCEDIMIENTO

5.1.PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON EL USO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.

El comité de tecnovigilancia de Famproject Cía.Ltda. será el encargado de recepcionar los efectos adversos generados por el uso de los dispositivos médicos comercializados por Famproject Cía. Ltda.

Como primer formato se utilizará el Anexo 2: “Reporte de eventos adversos de los DM y DMDIV”, el mismo que se archivará y se generarán los procedimientos correspondientes para el aviso al titular del registro sanitario.

Cuando corresponda, se utilizarán los formatos dispuestos por la ARCSA:

IE-B.5.1.9-DM-01;

ANEXO 1, Formato de reporte de eventos adversos para profesionales de la salud, establecimientos de salud, fabricantes, titulares de registro sanitario

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-17	
VERSIÓN: 05	
VIGENCIA: 01 Abr 2026	
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA	Página 9 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

ANEXO 2, Formato de reporte de eventos adversos de diagnóstico in vitro para profesionales de la salud, establecimientos de salud, fabricantes, titulares de registro sanitario.

ANEXO 3, Formato de Notificación de eventos adversos para pacientes, usuarios u otras personas.

ANEXO 4, Notificación de acciones correctivas de seguridad sobre el terreno (FSCA)

ANEXO 5, Nota de seguridad sobre el campo (FSN)

ANEXO 6, Formato para informes de investigación inicial, seguimiento y final

5.2.CRITERIOS PARA NOTIFICAR EVENTOS ADVERSOS AL CNTV

5.2.1. Primer Criterio: cuando un evento que ha ocurrido en Ecuador con el uso de un dispositivo médico autorizado

- Un mal funcionamiento o deterioro del dispositivo médico, si se usa de acuerdo con su intención de uso y según las instrucciones del fabricante
- Los eventos adversos imprevistos
- Inexactitud o imprecisión en el etiquetado, instrucciones de uso o materiales de promoción
- Resultados de falsos positivos o falsos negativos, los cuales no están declarados en el instructivo de uso y que provocan en el paciente un diagnóstico errado
- Eventos adversos sobre los pacientes, usuarios u otras personas, las cuales no están declarados en el instructivo de uso y que provocaron un daño temporal sobre este.
- Interacciones del dispositivo médico con otras sustancias o productos, las cuales no están declaradas en el instructivo de uso.
- Las omisiones y las deficiencias en el etiquetado, en las instrucciones de uso y/o en los materiales promocionales del dispositivo médico que provocaron un daño temporal al paciente.
- El descubrimiento de una falla de diseño durante la revisión del diseño.
- El descubrimiento de una amenaza grave para la salud pública
- Error de uso:

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-17		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 01 Abr 2026		
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA		Página 10 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

- Error de uso que no ocasiona muerte o ningún traumatismo grave, o que representa una amenaza grave para la salud pública.
 - Error de uso que ocasiona una muerte o un traumatismo grave, o que representa una amenaza grave para la salud pública
 - Error de uso que se convierten en eventos adversos que deben ser notificados
 - Si el titular del registro sanitario, fabricante o su representante autorizado determina que existe un error de uso y/o uso anormal de su dispositivo médico, la observación debe ser reportada al CNTV.
- k) Cualquier otro tipo de información nueva descrita en la literatura o información científica relativa a un evento adverso determinado.

5.2.2. Segundo criterio: Cuando el dispositivo médico está relacionado con el evento adverso

Al evaluar la relación entre el dispositivo médico y el evento adverso, se debe tener en cuenta la siguiente:

- a) La opinión basada en la información disponible, de un profesional de la salud, pacientes, usuario u otra persona
- b) La información en cuanto a episodios anteriores similares
- c) La tendencia en relación con las quejas y el incremento de frecuencias de eventos adversos e imprevistos que se conviertan en una alarma y representen un posible riesgo para la salud pública.
- d) Cualquier otra información que posea el fabricante, descrita en la literatura o información científica relativa a un evento adverso determinado

5.2.3. Tercer criterio: el evento adverso lleva a una de las siguientes consecuencias:

- a) Muerte de un paciente, usuario u otra persona
- b) Traumatismo grave de un paciente, un usuario u otra persona
- c) Deterioro grave del estado de salud de un paciente, usuario u otra persona
- d) Potencial de muerte o deterioro grave en la salud de un paciente, usuario u otra persona
- e) No hubo muerte o traumatismo grave, pero el episodio podría provocar la muerte o un traumatismo grave de ocurrir nuevamente en un paciente, usuario u otra persona

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-17		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 01 Abr 2026		
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA		Página 11 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

5.3. EVENTOS QUE NO DEBEN SER NOTIFICADOS, PERO DEBEN SER COMUNICADOS AL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO

- El usuario encuentra un defecto en el dispositivo médico, antes de ser usado en el paciente.
- Evento adverso causado por el estado del paciente
- Vida útil o período máximo de almacenamiento del dispositivo médico
- La protección contra fallas funcionó correctamente
- Probabilidad insignificante de causar la muerte o un traumatismo grave
- Eventos adversos descritos en un aviso de advertencia
- Excepciones concebidas por CNTV
- Cuando un mal funcionamiento o deterioro del dispositivo médico, fuero encontrados por el usuario previo a su uso.

Si se detecta un cambio en la tendencia o un aumento de la frecuencia de los eventos adversos, deberán ser notificados a la UZTV y/o CNTV.

5.4.EXCEPCIONES

- Un usuario encuentra un defecto en un dispositivo antes de que sea usado en un paciente.
- Evento adverso causado por el estado del paciente
- Vida útil o período máximo de almacenamiento del dispositivo médico
- La protección contra fallas funcionó correctamente
- Probabilidad insignificante de causar la muerte o un traumatismo grave
- Eventos colaterales esperados y previsibles
- Eventos adversos descritos en un aviso de advertencia

5.5.ERRORES DE USO

- Error de uso que ocasiona una muerte o un traumatismo grave, o que representa una amenaza grave para la salud
- Error de uso que no ocasiona muerte o ningún traumatismo grave y que no representa una amenaza grave para la salud pública

NOTA: cuando el fabricante y/o distribuidor detecta un uso anormal, pueden informarlo tanto al CNTV y/o UZTV, adjuntando la evidencia correspondiente.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-17		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 01 Abr 2026		
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA		Página 12 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Todos los posibles casos por error de uso deberán ser notificados al fabricante y/o titular del registro sanitario, para que ellos evalúen la ingeniería de diseño, ya que los errores pueden llegar a causar la muerte o un traumatismo grave o representan una amenaza grave para la salud pública.

5.6.PLAZOS

Los establecimientos que integran el SNTV, deben notificar por escrito a las UZTV y/o CNTV, todos los eventos adversos reportables, en los siguientes plazos:

- En caso de amenaza grave de la salud pública, la notificación debe hacerse en un término no mayor de 48 horas a partir de que se ha confirmado.
- En caso de muerte o deterioro grave temporal o permanente, de la salud de un paciente, usuario u otra persona, la notificación debe hacerse en un término no mayor de 10 días a partir de que se ha confirmado.
- Los demás eventos adversos que cumplan con los criterios de notificación de la normativa legal vigente deben notificarse en un término no mayor de 30 días a partir de que se ha confirmado.
- El plazo para presentar al CNTV el reporte de seguimiento final, será de seis meses (6) como máximo, dependiendo de la gravedad del evento adverso, pudiendo el titular del registro sanitario, solicitar una prórroga adicional no mayor a la del primer periodo.

5.7.ACCIÓN CORRECTIVA DE SEGURIDAD DE CAMPO (FSCA)

Es la medida adoptada por el fabricante para reducir el riesgo de muerte o deterioro grave de la salud asociado con el uso de un dispositivo médico.

Las medidas ejecutadas deben ser notificadas por el fabricante o el titular del producto mediante una nota de seguridad sobre el campo (FSN).

Las modificaciones de los dispositivos pueden incluir:

- La adaptación del dispositivo según la modificación o cambio de diseño efectuado por el fabricante.
- Cambios permanentes o temporales en el etiquetado o instrucciones de uso
- Actualizaciones de software.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-17	
VERSIÓN: 05	
VIGENCIA: 01 Abr 2026	
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA	Página 13 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

La comunicación de las FSCA, se deberá enviar a: tecno.vigilancia@controlsanitario.gob.ec . Adicional, se enviará al cliente una nota de seguridad en campo (FSN).

FSN consideraciones:

- Idioma castellano
- Título claro del aviso
- Indicar destinatarios de la notificación
- Describir el DM involucrado
- Describir detalladamente los peligros asociados con la falla del DM
- Contener un resumen de los resultados y conclusiones de la investigación del fabricante legal
- Acciones recomendadas para el titular del registro sanitario, y las acciones recomendadas para las personas que ya han utilizado
- Información del contacto del fabricante para cualquier información adicional que el usuario requiera

5.8.EVALUACION DE RIESGOS

El fabricante, el titular del registro sanitario y el distribuidor deberán monitorear e identificar los peligros asociados a los dispositivos médicos, durante todo el ciclo de vida útil de los productos.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-17		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 01 Abr 2026		
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA		Página 14 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

6. HISTORIAL DE CAMBIOS

No	Motivo del Cambio	Fecha
1	Documento Nuevo	24/Oct/2023
2	Revisión general del documento, actualización del formato. Se añade el Anexo 1. Tecnovigilancia	24/Ene/2024
3	Se añade el punto 5.5.TIPOS DE REPORTE	28/May/2024
4	En el punto 4. Se asigna de la siguiente manera: • Presidente: Responsable Técnico • Vicepresidente: Licenciado en Laboratorio Clínico • Secretario: Licenciado en Laboratorio Clínico • Vocales: Asesores Comerciales En el punto 5.1. Se añade: Como primer formato se utilizará el Anexo 2: “Reporte de eventos adversos de los DM y DMDIV”, el mismo que se enviará al titular del registro sanitario.	15/Ene/2025
5	En el punto 3.DEFINICIONES, se añade las definiciones de: De inmediato, Riesgo, Señal, UDI, Usuario. Se añade el punto 4.1.REUNIONES DEL COMITÉ DE TECNOVIGILANCIA. En el punto 5.2.CRITERIOS PARA NOTIFICAR EVENTOS ADVERSOS AL CNTV, se divide en: 5.2.1. Primer Criterio 5.2.2.Segundo Criterio 5.2.3.Tercer Criterio En el punto 5.3. EVENTOS QUE NO DEBEN SER NOTIFICADOS, PERO DEBEN SER COMUNICADOS AL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. Se añade: Evento adverso causado por el paciente Vida útil La protección contra fallas Eventos detectados previo al uso Señale el punto 5.4. EXCEPCIONES Se cambia la redacción del punto 5.5. ERRORES DE USO Se reemplaza el punto 5.5. TIPOS DE REPORTE por 5.6.PLAZOS. Se añade el punto 5.7. ACCION CORRECTIVA DE SEGURIDAD DE CAMPO (FSCA) y 5.8. EVALUACIÓN DE RIESGOS	01/Abr/2026

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-17	
VERSIÓN: 05	
VIGENCIA: 01 Abr 2026	
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA	Página 15 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	


7. CAPACITACIÓN

REQUIERE DIVULGACIÓN		DIRIGIDO A	
SI	☒	Gerente General	X
		Responsable Técnico	X
NO	☐	Analista de Calidad	X
		Jefe Financiero y Contable	
		Asistente Contable	
		Jefe de Operaciones	
		Jefe de Logística	
		Responsable de Bodega	
		Transportista	
		Jefe Comercial y de Ventas	X
		Asesor Comercial	X
		Analista de Compras Públicas	X
		Back Office	X
		Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones	X
		Ingeniero de Servicios de Campo	
		Especialista de Aplicaciones	X
		Ingeniero de TIC's	
		Community Manager	
		Coordinador de Marketing	

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-17	
VERSIÓN: 05	
VIGENCIA: 01 Abr 2026	
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA	Página 16 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

8. ANEXOS

Anexo 1. Tecnovigilancia

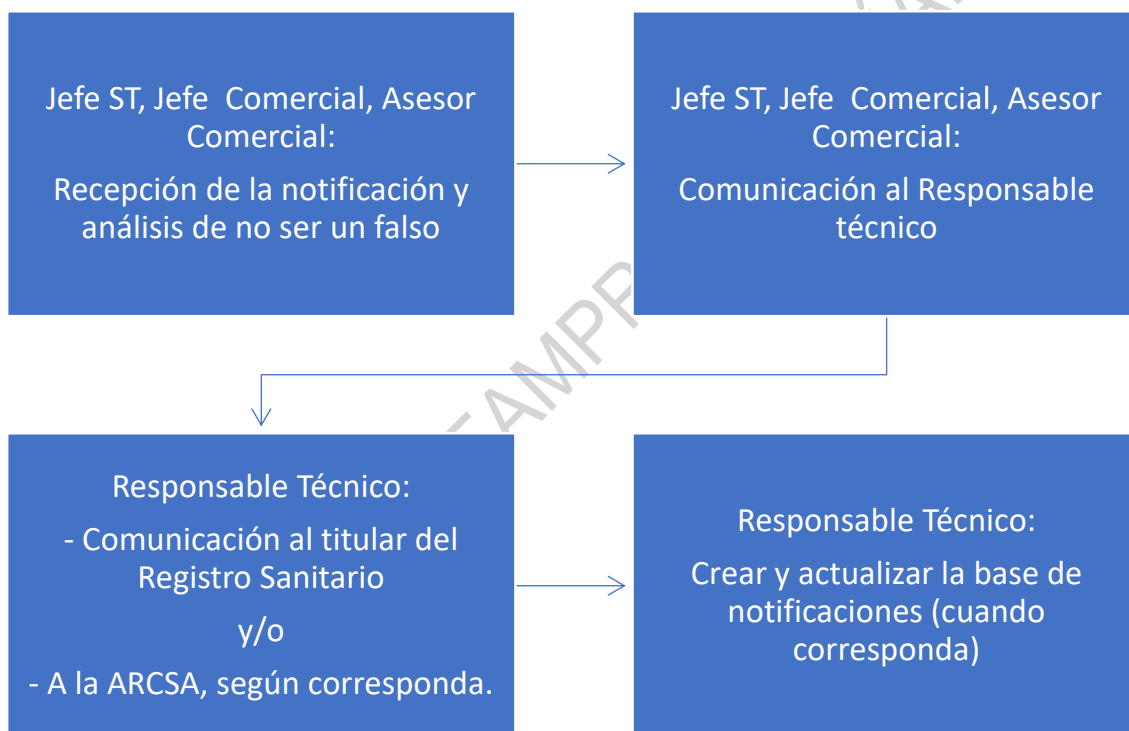

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-17		
VERSIÓN: 05		
VIGENCIA: 01 Abr 2026		
TÍTULO: TECNOVIGILANCIA		Página 17 de 17
Normativa para control del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Anexo 2: “Reporte de eventos adversos de los DM y DMDIV

REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS DE LOS DM Y DMDIV	 FAMPROJECT	ANEXO 1
		REFERENCIA: TECNOVIGILANCIA CA-01-17

Reportado por:		Fecha de reporte:	
Entidad del reporte:			
Evento reportado:			
Producto:			
ID	Descripción Producto	Lote	
Causas:			
Análisis y Resultados:			
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO: Registro Sanitario:			
Realizado por:		Fecha:	
Revisado por:		Fecha:	

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
calidad@famproject.com.ec
 Teléfono: 032585583

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de
 FAMPROJECT. CIA. LTDA.